

Dominant Flex



LA PUISSANCE DU CHOIX



Dominant Flex - Aspirateur chirurgical

Dominant Flex

Le premier aspirateur Medela à débits sélectionnables


Permettre une aspiration fiable, simple et hygiénique. Les aspirateurs Dominant Flex peuvent être utilisés, en hôpital/clinique, en chirurgie ambulatoire ou en cabinet médical, pour tous types d'aspiration et aussi en complément d'une aspiration murale dans les applications suivantes : chirurgie générale, liposuction, endoscopie, ORL, neurochirurgie.

Choisir le débit. Désormais, plus besoin de changer d'aspirateur lorsque vous avez besoin d'un débit différent. Dominant Flex fonctionne en mode pré-défini à 50 l/min. Lorsque vous avez besoin d'un vide plus rapide, appuyez sur le bouton CleanTouch de 60 l/min. Pour des opérations sensibles requérant le moins de bruit possible, appuyez simplement sur le bouton 40 l/min pour réduire le bruit.

Opter pour la fiabilité. Notre procédé de développement de nouveaux aspirateurs tient toujours compte des besoins des clients. Medela utilise des matériaux durables, teste les nouvelles conceptions et met en œuvre des solutions d'ingénierie intelligentes pour poursuivre sa tradition de fournir des aspirateurs durables et de haute qualité.

Choisir une protection hygiénique. La conception du logement de Dominant Flex, les boutons CleanTouch et la localisation de ses éléments de commande aident à réduire le temps nécessaire au nettoyage. Pour plus de protection, vous pouvez choisir parmi une grande variété de filtres. Nos systèmes de collecteurs de liquides fournissent une protection intégrée.

Le choix de la simplicité. Notre équipe d'experts a habilement combiné ingénierie de pointe et simplicité de fonctionnement. La construction intérieure de Dominant Flex réduit l'entretien. Le fonctionnement par une touche est intuitif et facile, avec des voyants indiquant le mode actif.

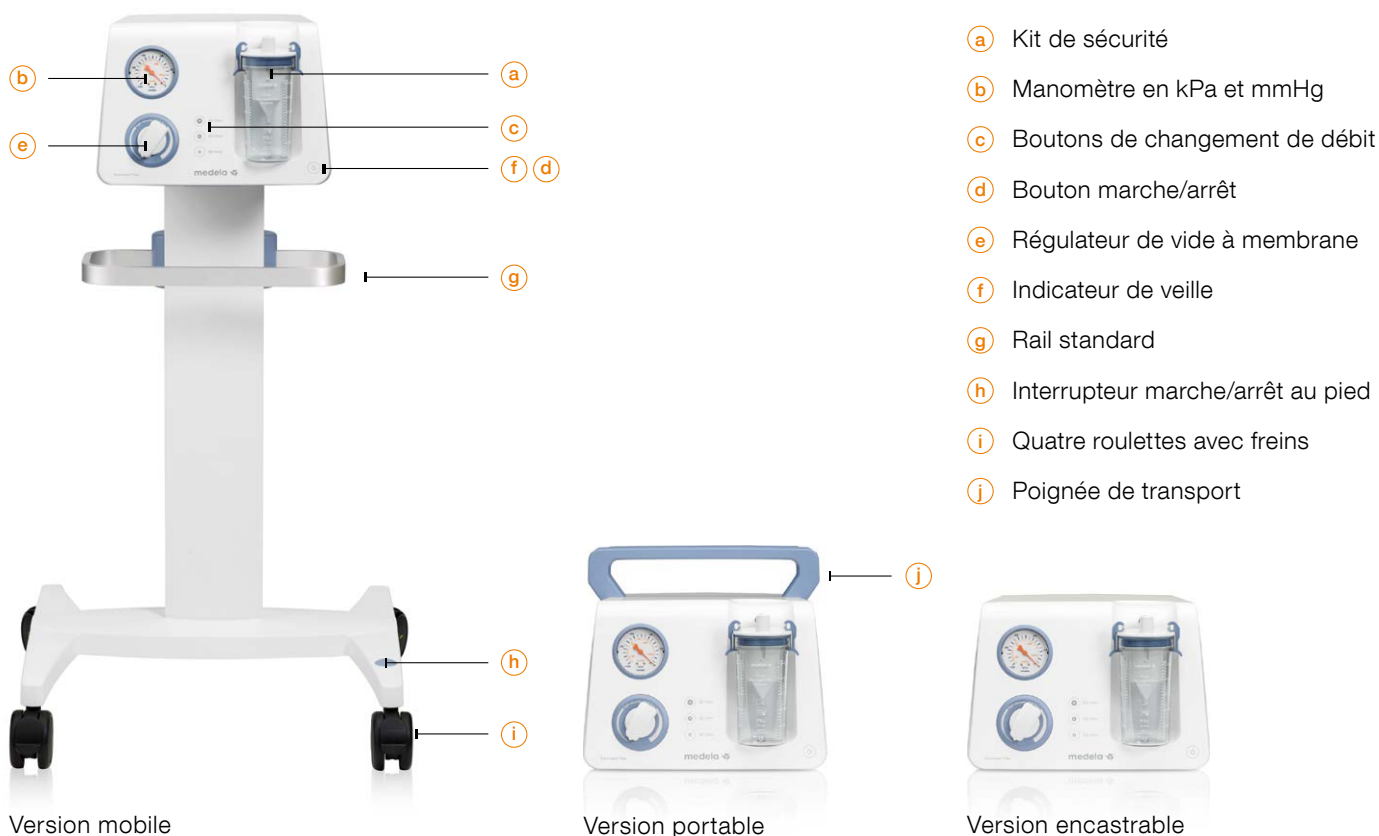

La puissance du choix

Avec Dominant Flex, vous pouvez désormais être flexible et réaliser davantage d'applications avec un seul aspirateur. Le débit standard de 50 l/min est le point de départ idéal de la plupart des procédures. Mais si vous avez besoin d'un vide plus rapide, une simple pression du bouton de 60 l/min suffit à faire passer l'aspirateur en mode turbo. Une pression du bouton de 40 l/min permet immédiatement un fonctionnement silencieux.



Modification du débit par une touche

Fiabilité suisse

Medela remplit les promesses du label "Fabriqué en Suisse". Nous avons appliqué plus de 50 années d'expérience en sapiration médicale pour créer un moteur piston/cylindre moderne. Un matériau de haute technologie résistant à la chaleur permet un fonctionnement durable et fiable. Une technologie brevetée et une construction intelligente réduisent l'entretien.



Composants de haute qualité, durables

Très hygiénique

Un boîtier en matériau de haute qualité, résistant à de puissants agents désinfectants et un capot lisse en une pièce en facilitent le nettoyage. La technologie CleanTouch des boutons marche/arrêt et de changement de débit offrent un fonctionnement en une touche sans écarts, ni rainures. Un fonctionnement mains libres de la pompe est possible grâce à l'interrupteur marche/arrêt intégré sur le pied.



Hygiénique grâce à une construction intelligente

Simplicité sophistiquée

Medela a développé l'aspirateur Dominant Flex pour qu'il soit facile à utiliser et polyvalent. Le grand manomètre peut être vérifié d'un rapide coup d'œil. Le régulateur de vide à membrane facilement modifiable vous permet des réglages précis du vide. Les boutons CleanTouch signifient que le débit peut être modifié d'une simple pression. La pompe est disponible en version encastable, portable ou sur pied pour s'adapter à votre environnement médical. Le système de collecteurs de liquides réutilisables ou à usage unique de Medela est spécialement conçu pour sa compatibilité et sa fonctionnalité avec les aspirateurs Medela.



Fiabilité et technologie moderne

Avantages

- Dominant Flex est le premier aspirateur Medela à débit réglable, qui vous permet de choisir un vide plus rapide ou un fonctionnement plus silencieux.
- Notre procédé suisse de développement et de fabrication apporte la précision mécanique pour des performances optimales.
- Fiabilité, grâce à une expérience de plus de 50 ans adaptée aux besoins modernes.
- L'intérieur simplifié de la pompe réduit l'entretien.
- facilité d'utilisation grâce à une conception intelligente et une large gamme d'accessoires compatibles.
- 5 ans de garantie.

Accessoires

Système de collecteurs à usage unique

Des poches d'aspiration à usage unique et des récipients réutilisables en PC permettent une manipulation propre et simple et une gestion efficace des liquides. Tailles : 1,5 et 2,5 litres.



Gamme de tuyaux

En silicone ou en PVC.



Système de collecteurs réutilisables

Les récipients et couvercles autoclavables en PSU recueillent les sécrétions de manière simple et économique. Tailles : 1, 2, 3 et 5 litres.



Régulateur de vide au pied pour un réglage mains libres du vide

Peut être fixé aux récipients d'aspiration standard de Medela.



Gamme de filtres

Pour protéger la pompe de tout débordement, protéger l'environnement contre les bactéries ou neutraliser les odeurs.






Interrupteur marche/arrêt au pied



Longueur du câble de 3,5 m.






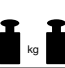


Complétez votre pompe Dominant Flex avec les accessoires Medela pour davantage de flexibilité et de facilité d'utilisation.

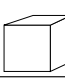Caractéristiques techniques

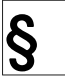	Vide élevé - 95 kPa - 713 mmHg
	Haut débit 40 l/min 50 l/min 60 l/min
	9,3 kg (version encastrable)

	H x L x P (version encastrable) 210 x 305 x 375 mm
	Alimentation 100-240 V

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/CEE), IIa 5 ans de garantie	
		
		

Technologie d'aspiration médicale pour professionnels de la santé

Veillez contacter votre représentant local Medela pour tout renseignement.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Suisse
www.medela.com

Contact local :

Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB's-Hertogenbosch
Belgium
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.be
www.medela.be

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone +01 905 608 7272
Fax +01 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax +33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch